




# Дерматоскопы

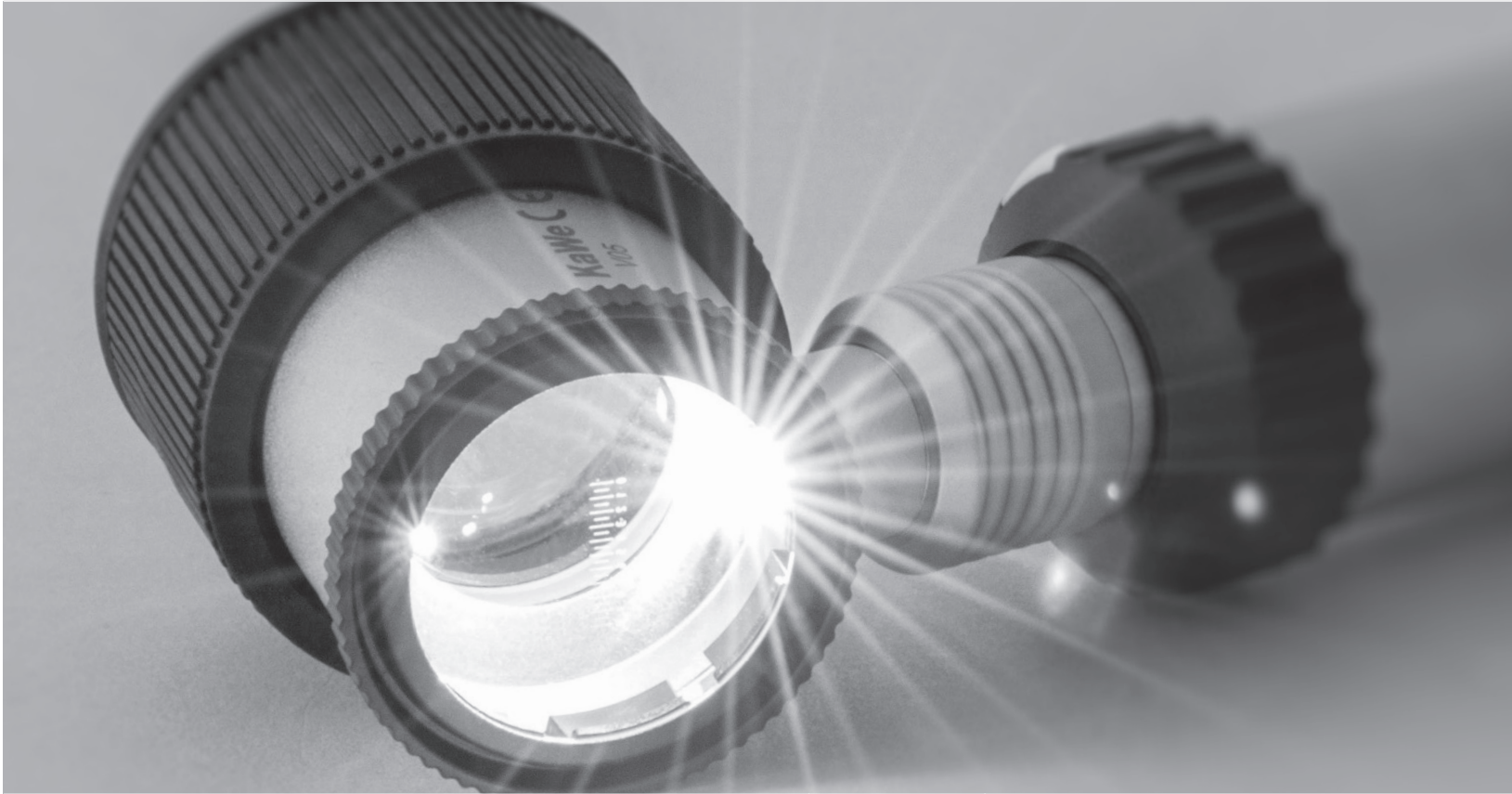

ОБЗОР		KaWe ЕВРОЛАЙТ KaWe EUROLIGHT®		KaWe ПИККОЛАЙТ KaWe PICCOLIGHT®
		D30	D30 LED	D
напряжение питания [В]		2,5	3,5	2,5
зарядное напряжение [В]			240 В	
головка	металлическая головка	•	•	•
контактное стекло со шкалой	Ø 25 мм	•	•	•
увеличение	10-ти кратное	•	•	•
установка фокуса	от -6 до +3,5 диоптрий	•	•	•
крепление	замок „Клик“	•	•	
	резьбовое соединение			•
рукоятка	металлическая рукоятка	•	•	
	пластиковая рукоятка			•
источник света	ксенон-галогенная лампа	•		
	вакуумная лампа			•
	LED стандарт лампа		•	
продолжительность эксплуатации источника света	прибл. 15 ч.			•
	прибл. 20 ч.	•		
	прибл. 50.000 ч.		•	
регулятор света	плавно регулируемая яркость света	•		
перезаряжаемы	в зарядном устройстве KaWe МедЧарж 4000   KaWe MedCharge® 4000 (с KaWe аккумулятором)	•		
	в штепсельной розетке		•	
возможные источники питания	батарейка(и)	•		•
	KaWe-аккумулятор	•	•	
объем поставки	аккумулятор 3,5 В		•	
	сумка на молнии	•	•	
	тканевая сумочка			•
цвет	найт   night			•

# KaWe ЕВРОЛАЙТ | KaWe EUROLIGHT®

## ДЕТАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ



Возможность применения аккумулятора или батареек

### Металлическая рукоятка с двойной функцией

- ① с перезаряжаемой батареей (аккумулятор) = аккумуляторная рукоятка для зарядного устройства KaWe МедЧарж 4000 / KaWe MedCharge® 4000
- ② с батарейками = батарейечная рукоятка



D30  
с замком „Клик“

### KaWe МедЧарж 4000 KaWe MedCharge® 4000


Зарядное устройство  
только для  
KaWe ЕВРОЛАЙТ  
дерматоскопа

ЕС / ВБ / США

(► 189)



## KaWe ЕВРОЛАЙТ

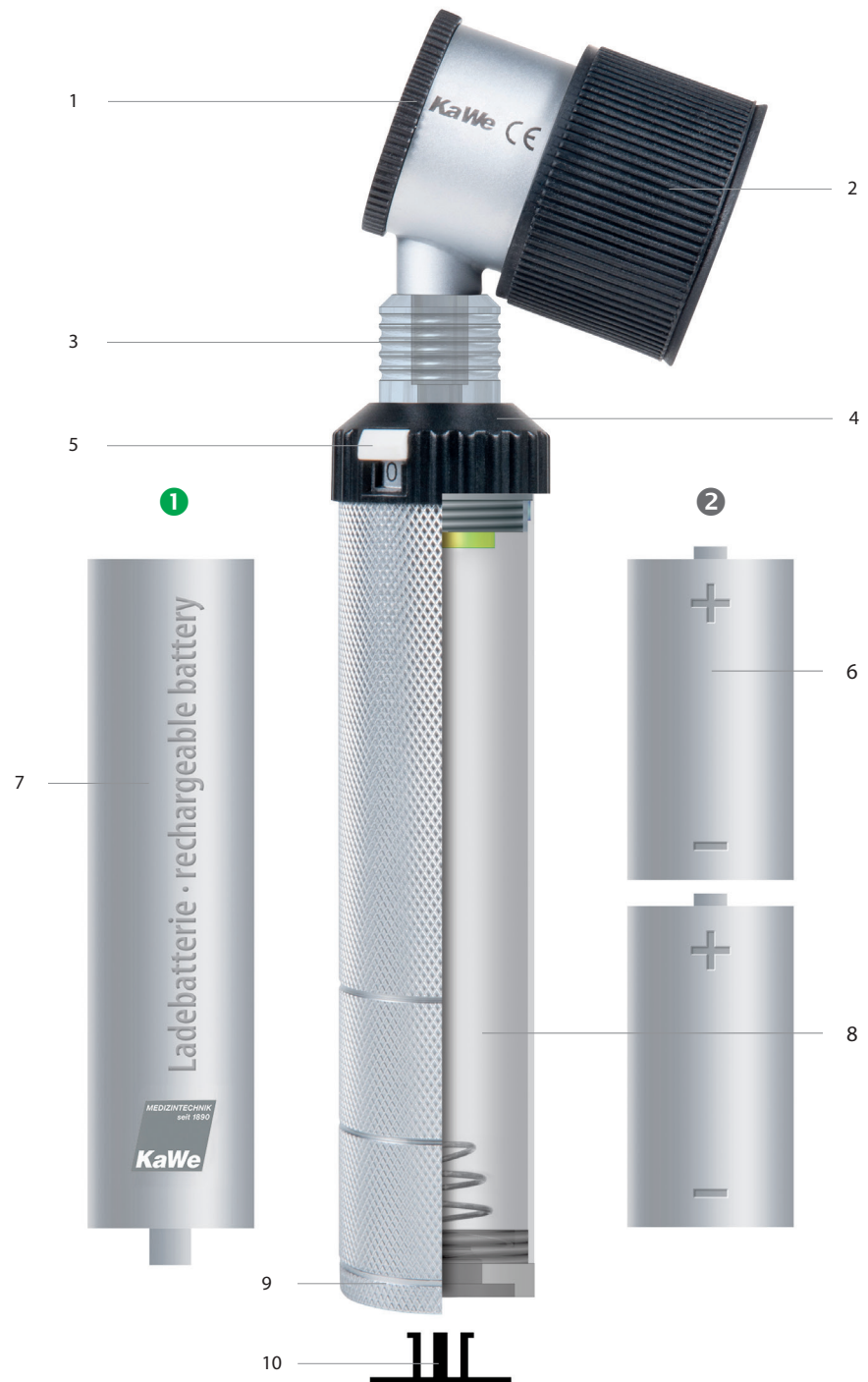

# KaWe ПИККОЛАЙТ | KaWe PICCOLIGHT®

ДЕТАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ




Работает только от батареек

## KaWe ПИККОЛАЙТ

100

KaWe ЕВРОЛАЙТ  
KaWe ПИККОЛАЙТ

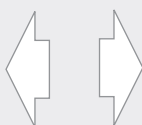

- 1 контактное стекло со шкалой
- 2 установка фокуса
- 3 замок „Клик“
- 4 регулятор света, плавное регулирование яркости света (за исключением LED)
- 5 фиксирующий переключатель
- 6 батарейки
- 7 аккумулятор
- 8 батарейная-/аккумуляторная рукоятка
- 9 металлический колпачок
- 10 заглушка
- 11 батарейная рукоятка
- 12 металлическая клипса
- 13 батарейки




# KaWe ЕВРОЛАЙТ | KaWe EUROLIGHT®

## KaWe ПИККОЛАЙТ | KaWe PICCOLIGHT®

СЕРИЯ

**KaWe ЕВРОЛАЙТ**

2,5 В

1 D30 XH - 

3,5 В

2 D30 LED  -**Характеристика:**

- 10-ти кратное увеличение
- металлическая рукоятка с замком „Клик“

Большое контактное стекло (Ø 25 мм) со шкалой для раннего определения пигментационных изменений кожи!

**KaWe ПИККОЛАЙТ**


2,5 В

3 D VL - -

**Характеристика:**

- 10-ти кратное увеличение
- батарейная рукоятка
- резьбовое соединение головки с рукояткой

**KaWe ЕВРОЛАЙТ D30**

- замок „Клик“
- ксенон-галогенная лампа
- 10-ти кратное увеличение
- установка фокуса от -6 до +3,5 дпт
- равномерное оптимальное освещение
- металлическая батарейная/аккумуляторная рукоятка С
- реостат, регулирующий яркость света
- в сумке на молнии
- в компл. с 1-им флаконом дермагеля, 250 мл
- батарейки: 2 Baby (тип С) 

1 D30 | 2,5 В | XH | 

REF 01.31130.001

 источник света

REF 12.75132.003

101

**KaWe ЕВРОЛАЙТ D30 LED 3,5 В**

- замок „Клик“
- заряжаемая от сети (ЕС 240 В)
- LED лампа стандарт 3,5 В
- освещенность са. 15.000 люкс
- срок службы лампы прил. 50.000 ч
- в компл. с NiMH аккумулятором 3,5 В
- 10-ти кратное увеличение
- установка фокуса от -6 до +3,5 дпт
- равномерное оптимальное освещение
- металлическая аккумуляторная рукоятка С
- в сумке на молнии
- в компл. с 1-им флаконом дермагеля, 250 мл


2 D30 | 3,5 В | LED |  EC

REF 01.31630.811

 источник света

REF 12.75254.003

**KaWe ПИККОЛАЙТ D**

- вакуумная лампа
- 10-ти кратное увеличение
- установка фокуса от -6 до +3,5 дпт
- равномерное оптимальное освещение
- батарейная рукоятка AA, из пластика, чёрная
- в тканевой сумочке
- батарейки: 2 Mignon (тип AA) 

3 D | 2,5 В | VL |  найт

REF 01.33100.021

 источник света

REF 12.75112.003

REF Артикульный номер



Заряжаема в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве KaWe МедЧарж 4000



Батарейки не входят в объем поставки!



Аккумулятор входит в объем поставки

XH Ксенон-галогенная лампа

VL Вакуумная лампа

LED LED лампа



# Головки и рукоятки дерматоскопа

## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

### KaWe ЕВРОЛАЙТ



D30



для REF 01.31130.001

2,5 В | XH

REF 01.91130.002

D30 LED 3,5 В



для REF 01.31630.811

3,5 В | LED

REF 01.91630.002

C30

Батарейная-/аккумуляторная рукоятка С

Ø 28 мм



для REF  
KaWe ЕВРОЛАЙТ С30, F.O., VET, E, D,  
KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.  
01.11130.001, 01.11135.001, 01.11136.001,  
01.11330.001, 01.11530.002, 01.11534.001,  
01.12330.001, 01.12530.002, 01.21300.001,  
01.21361.001, 01.21366.001, 01.24355.002,  
01.31130.001, 02.15008.003, 02.23001.001,  
02.23004.001, 02.23014.002, 02.25004.002

2,5 В |

REF 01.74130.002

C / 3,5 В

Аккумуляторная рукоятка для зарядки в штепсельной розетке (без аккумулятора)  
Ø 28 мм



для REF  
KaWe ЕВРОЛАЙТ  
F.O.30, E36, D30 LED  
KaWe КОМБИЛАЙТ  
F.O.30  
01.11430.811,  
01.12430.811,  
01.25361.811,  
01.31630.811

3,5 В | 240 В (EC)

REF 01.74180.812

102

### KaWe ПИККОЛАЙТ

D



для  
REF 01.33100.021

2,5 В | VL

REF 01.93100.022

D 2,5 В

Батарейная рукоятка AA

для  
REF 01.33100.021

2,5 В | найт | night

REF 01.74200.021



### Дермагель 250 мл | Derma-Gel

Нанесение на исследуемый участок специального дермагеля помогает избежать световые отражения и устранить шероховатости и неровности кожи, что помогает оптимально точно рассмотреть патологию кожи.

Другие свойства: отсутствие вредных воздействий, отсутствие жира, хорошее выравнивание при неровностях кожи, отличная цветопередача, хорошо смывается, превосходит масло, растворим в воде, не содержит формальдегида, не оставляет пятен на коже и одежде.

для KaWe ЕВРОЛАЙТ D30, D30 LED, KaWe ПИККОЛАЙТ D

упак. единица = 5 шт.



REF 01.99020.002

### Контактное стекло

со шкалой для всех KaWe дерматоскопов



для KaWe ЕВРОЛАЙТ D30, D30 LED,  
KaWe ПИККОЛАЙТ D

Ø 25 мм

REF 01.99010.001

### Аккумулятор 3,5 В

- короткий
- заряжается от штепсельной розетки
- для металлической аккумуляторной рукоятки C



3,5 В | NiMH

REF 12.80120.742

Аккумулятор входит в объем поставки  
XH Ксенон-галогенная лампа

VL Вакуумная лампа  
LED LED лампа

REF Артикульный номер