

13


# Биноккулярные лупы



# Биноклярные лупы

## С HRI-ОКУЛЯРОМ И ViTECH-ОПТИКОЙ

ДЕТАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

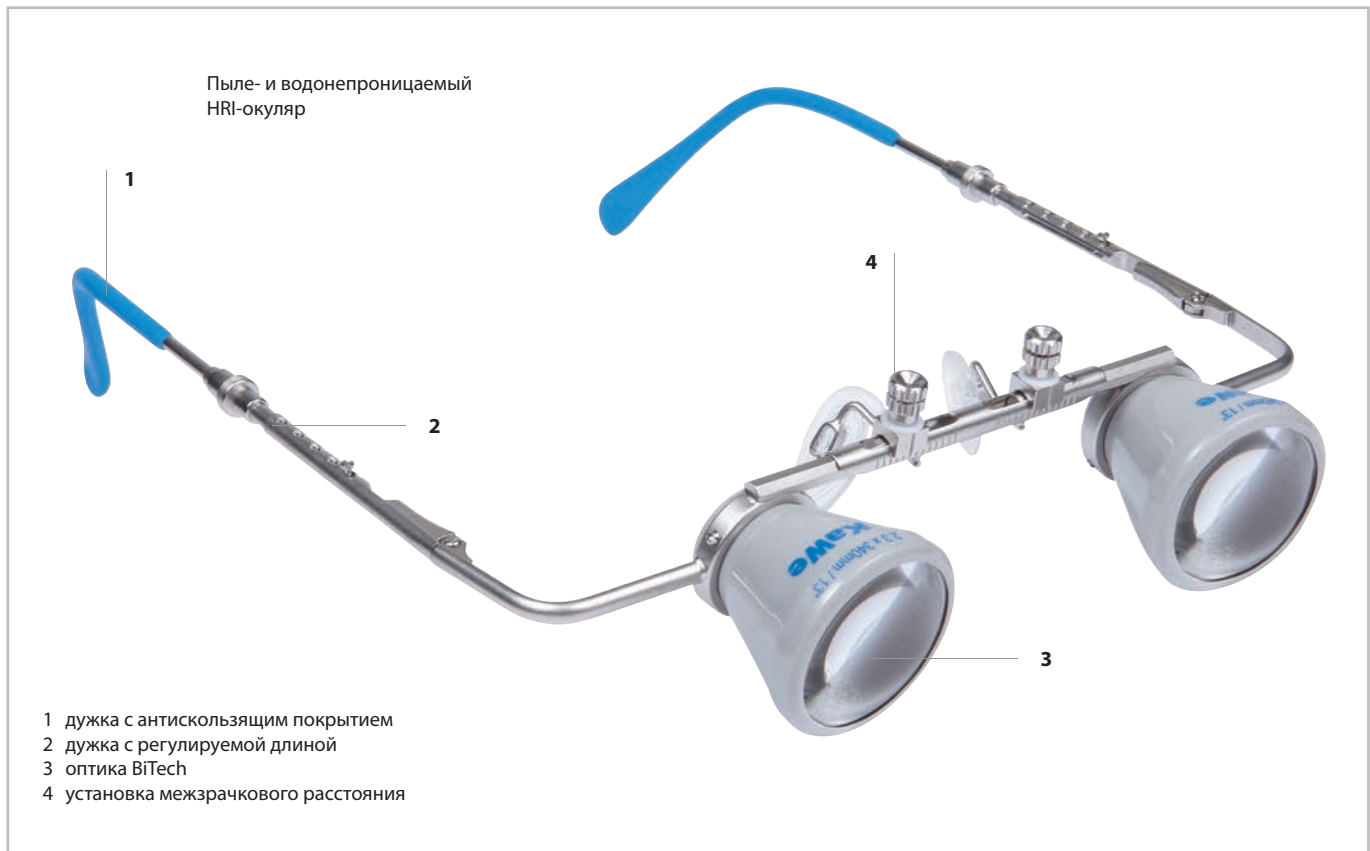

148

### Безупречная оптика

Биноклярное зрение, позволяющее видеть структуру предмета, и точная работа обеими руками – эти преимущества соединяются в биноклярных лупах. Всё возрастающие требования к точности и качеству, а также новые виды хирургии, делают биноклярные лупы незаменимыми помощниками врачей. Поэтому они находят применение в стоматологии, дерматологии, отоларингологии, офтальмологии и общей медицине, в нейрохирургии, при микрохирургических вмешательствах и в ветеринарной медицине, а также при других медицинских исследованиях.

Биноклярные лупы фирмы KaWe обеспечивают чёткость зрения и удобное, индивидуально регулируемое, положение при работе. В нашем ассортименте представлены модели следующей комплектации: лупы для защитных очков BS 2,3 и в классической оправе BC 2,3. Благодаря усовершенствованию оптических элементов и структуры оптического тубуса сила рассеянного света и рефлексов сводится к минимуму (менее 1%). Для максимальной удобной фиксации на голове все модели оснащены двойным шарниром

со встроенным механическим элементом из цельного материала, фрезерованного на ЧПУ. Технология Vi-Tech, используемая в производстве биноклярных луп, позволяет полностью отказаться от ахроматического объектива, за счет чего уменьшается вес и стоимость прибора. Совершенство формы, удобная посадка, пыле- и водонепроницаемая оптика безусловно выделяют все модели биноклярных луп KaWe.

Для оптимального ухода за оптикой предлагается чистящий спрей KaWe на безалкогольной основе. Он покрывает оптическую поверхность линзы защитной плёнкой и гарантирует долгую защиту.

# Биноклярные лупы

С HRI-ОКУЛЯРОМ И VITESH-ОПТИКОЙ

## Характеристика BC 2,3 / BS 2,3:

- окуляр системы HRI
- окуляры индивидуально настраиваются и фиксируются в зависимости от межзрачкового расстояния
- оптика с 2,3-кратным увеличением
- оптика пыле- и водонепроницаема
- современная технология оптики ViTesh позволяет сознательно отказаться от объектива-ахромата. Эта технология уменьшает вес и стоимость изделия.
- за счёт применения улучшенных оптических элементов и структуры оптического тубуса (MT9019, REF 33, VDI3400) рассеянный свет и рефлексы сводятся к невоспринимаемому уровню (менее 1%)
- предварительно юстированный угол зрения обеспечивает рабочее расстояние 340 мм и поле зрения 110 мм



## Биноклярная лупа С НРИ-ОКУЛЯРОМ И ВИТЕСН-ОПТИКОЙ

### BS 2,3 С ОПРАВОЙ

KaWe Биноклярная лупа BS 2,3 – это классический вариант биноклярных луп KaWe. Металлическая оправа на пружинных шарнирах гарантирует точную подгонку по форме и подкупает своей простой, но точной механикой. Длину дужки с антискользящим покрытием можно установить в пределах 125 - 150 мм.



- дужка с анти-скользящим покрытием
- дужка с регулируемой длиной
- установка межзрачкового расстояния

#### BS 2,3

Комплект поставки:

- чистящий спрей 25 мл (не содержит спирт и растворитель, антистатик)
- салфетка из микрофибры
- эксклюзивный футляр для очков

Вес 40 г

BS 2,3

REF 13.10321.302

150

### BS 2,3 С ЗАЩИТНЫМИ ОЧКАМИ

- Настраиваемые и фиксируемые окуляры регулируются благодаря тонкой юстировке дуплексных шарниров и оптимально подобранному механизму, изготовленному на фрезерных станках с ЧПУ. Легко и точно устанавливается угол наклона. Всё это обеспечивает удобное рабочее положение.
- Дополнительные характеристики см. (» 194)



#### BS 2,3

Комплект поставки:

- чистящий спрей 25 мл (не содержит спирт и растворитель, антистатик)
- салфетка из микрофибры
- эксклюзивный футляр для очков
- шнур для оправы

Вес 66 г

BS 2,3

REF 13.15121.301

REF Артикульный номер